

**MEDA**

Mic-Key® – Gastrostomiport (ulazni dio gastrostome)

Korištenje i održavanje

Mic-Key® Gastrostomiport je jednostavan, mali i elastičan proizvod za davanje/dobijanje hrane, tečnosti i lijekova na bezbjedan način kod različitih problema prilikom gutanja. Mic-Key® omogućava živjeti koliko je to moguće normalno, jer ima odbijni ventil i pričvršćen je balonom.

Primjena/dopremanje /obrok

Kako bi se izbjegla mučnina, preporučuje se da osoba bude u sjedećem /polusjedećem položaju.

Osigurajte da hrana/prehrana koja se uzima putem sonde bude na sobnoj temperaturi

do i od spojnice od crijeva za povezivanje:

Crna crta prema crnoj crti, gurnite unutra,

okrenite za četvrtinu do trećine obrtaja,

prilikom odvrtnja okrenite unazad istim putem i

izvucite kada crna crta bude na crnoj crti.


Crijevo koje služi za povezivanje Mic-Key® isperite sa

10-20 ml vode prije i poslije svakog dopremanja. Crijevo koje služi za

povezivanje je jednokratno / za jednog pacijenta, a za višekratnu

upotrebu je važno da se temeljito očisti, čuva u frižideru i mijenja

najmanje na svakih 2 -7 dana.

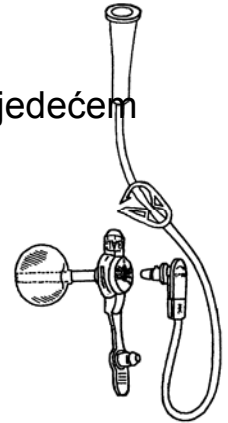

Održavanje – opšti dio

Operite i osušite prostor oko stome kao dio svakodnevne higijene.

Sa njim se dosta lako tušira, kupa u u kadi, bazenu itd.

U toku održavanja i hranjenja dobro se pridržavajte higijene hrane, nisu neophodni nikakvi sterilni postupci čuvanja.

Održavanje Mic-Key® aparata

Za vrijeme svakodnevnog ispiranja rotirajte Mic -Key®.

Ukoliko ne koristite Mic-Key® , svaki dan ga isperite ga vodom.

Kontrolišite i mijenjajte vodu u balonu /kesici jednom sedmično, na primjer, svakog ponedjeljka.

Mic-Key® može se zamjenjivati kod kuće i trebalo ga zamijeniti svakog trećeg mjeseca, kada će promijeniti boju, a i oslabiće se povratni ventil.

Ukoliko se Mic-Key® izvuče

Uzmite novi i postavite ga što prije moguće.

U slučaju da nemate novi Mic-Key® uzmite stari, operite ga, vratite unutra i pričvrstite flasterom ili nečim sličnim.
Veoma je bitno da van stoma ostane otvorena – kontaktirajte što prije medicinsku sestru/doktora za novi Mic-Key®.

Kod neugodnih bolova povezanih sa dopremanjem/obrokom kontaktirajte medicinsku sestru/doktora.

Za više informacije, posetite Web-stranicu Mic-Key-a!
www.mic-key.nu