

Kopplingslangar med ENFit till Mic-Key



Rak Bolusslang

0143-12, 30 cm
0143-24, 60 cm



**Vinklad kopplingslang
med medicinport**

0141-12, 30 cm
0141-24, 60 cm



**Vinklad kopplingslang
med medicinport**

0142-02, 5 cm



**Vinklad kopplingslang
utan medicinport**

0144-12, 30 cm
0144-24, 60 cm

MED-2019-0023 MAR

Du har fått en Mic-Key™, insatt med hjälp av Mic™ Introducer Kit

Mic Introducer Kit är ett modernt sätt att anlägga en gastrostomi. Fördelen är att en ballongfixerad gastrostomiport som Mic-Key kan anläggas direkt.



I din gastrostomi har du fått en Mic-Key av storlek Fr och längd cm.

Vid insättning är ballongen kuffad med ml vatten.

Kontaktperson Tel. nr:

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken.

Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

Mic-Key gastrostomiport med låg profil (liten och diskret) är en produkt för att ge/få näring, vätska och medicin vid olika näringsbehov. Mic-Key har en inbyggd backventil med speciellt anpassad låsmekanism för att med kopplingsslangen underlätta säker anslutning vid näringstillförsel.


För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida www.gastrostomi.se

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatrix Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatrix.com
www.gastrostomi.se

Mic Introducer Kit (MIK)

När man sätter in en gastrostomiport/Mic-Key med MIK fäster man 3-4 st suturer (se bild nedan). Vrid inte suturlåsen/knapparna.

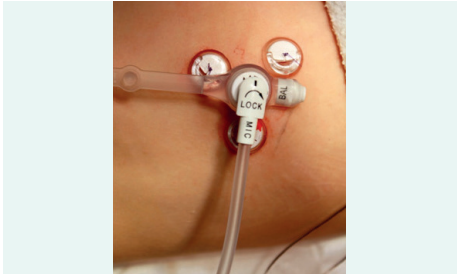

Dessa suturer/knappar ska lossna av sig själv eller tas bort efter 2-3 veckor.

Kontakta din sjuksköterska för hjälp med att avlägsna suturerna eller om dina suturknappar lossnar inom 2 veckor.

OBS! Suturlåsen/knapparna kan utgöra kvävningsrisk för små barn, förhindra att små barn sväljer dem.

Vid rodnad eller andra besvär kring suturerna, kontakta din sjuksköterska.

Första bytet av Mic-Key bör ske tidigast efter 2 månader. Om byte måste ske tidigare ska detta göras på specialistklinik.

Under de 14 första dagarna efter ingreppet är det rekommenderat att avstå bad i badkar, bassäng m.m.

Området runt din gastrostomiport ska hållas så rent och torrt som möjligt, kontakta din sjuksköterska om du är osäker.

Användning, tillförsel och måltid med Mic-Key

- Var noga med hygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfaringssätt.
- En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk.
- Till- och från koppling av kopplingslang: Svart streck (på kopplingslang) mot svart streck (på Mic-Key), tryck in, vrid kopplingslangen ett kvarts- till trekvartsvarv. Vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut kopplingslangen när svart streck är mot svart streck.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom kopplingslangen och Mic-Key med 10-20 ml vatten. Fyll gärna kopplingslangen innan tillkoppling till Mic-Key.
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta (minst 30°), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid. Se till att väskan/maten är ljummen/rumstempererad.
- Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid, kontakta din sjuksköterska eller doktor.
- Om Mic-Key inte används, spola alltid igenom med 10-20ml vatten dagligen.

Om din Mic-Key åker ut

- Ta en ny och sätt in denna så snart som möjligt. Har du ingen hemma, ta den gamla, tvätta den, stoppa in och fäst med sårtejp eller liknande. Det är mycket viktigt att hålla gastrostomikanalen öppen. Kontakta snarast sjuksköterska/doktor för att få en ny Mic-Key.
- Om Mic-Key åker ut inom den första månaden efter insättandet med MIK bör specialistklinik kontaktas omgående.

Skötsel och byte

- Tvätta och torka runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien. Inget förband behövs.
- Det går bra att duscha, bada badkar, bassäng m.m. med Mic-Key.
- Mic-Key kan bytas i hemmiljö och bör bytas cirka varannan månad, då kommer den att vara missfärgad. Om byte måste ske inom fyra veckor efter insättandet med MIK ska detta göras på specialistklinik.
- Byte av Mic-Key: Ta en ny, fyll ballongen (märkt BAL) med 3-5 ml sterilt eller rent (kokt avsvolat) kranvatten och kontrollera denna, töm den igen. Töm ballongen (märkt BAL) på den gamla Mic-Key och dra ut den ur gastrostomikanalen. Doppa den nya Mic-Key i lite glidmedel, för in den (ballongdelen), fyll ballongen med 3-5 ml (max 10 ml, max 5 ml för

12 Fr) sterilt eller rent (kokt avsvolat) kranvatten. Verifiera att läget är riktigt på den nya Mic-Key med t ex en pH-sticka (koppla till en kopplingslang dra med spruta tillbaka lite maginnehåll och spruta ut på pH-stickan) Släng den gamla Mic-Key.

- Kontrollera och fyll eventuellt på ballongen/kuffen med vatten (3-5ml) en gång i veckan, exempelvis varje måndag. Första gången två till tre veckor efter insättandet med MIK.
- Kopplingslangen är en enpatients slang. Om den används flera gånger är det viktigt att den rengörs ordentligt med varmt diskvatten med noggrann sköljning efter, förvaras rent och torrt. Vi rekommenderar för bästa hygien att kopplingslangen byts var eller varannan dag. I hemmiljö, med noggrann rengöring, kan kopplingslangen om den ser ren och hel ut användas något längre (1-2 veckor max) med individuell anpassning.

Allmänna råd

Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun. Kan man äta via munnen så är det viktigt att fortsätta med det.

Rodnad, vätskande, öm hud runt gastrostomin kan bero på läckage, tvätta rent med vatten och lufttorka flera gånger per dag. Smörj gärna in området med mjukgörande kräm vid behov.